

DIXION

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НЕОНАТОЛОГИИ

ИНКУБАТОРЫ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ: Бэбигард-1101 • 1103 • 1107 • 1120
ОТКРЫТЫЕ РЕАНИМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ: Бэбигард-1138 • 1139 • 1140 • 1145

ФОТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ БЛОКИ: Dixon XHZ-90L • XHZ-90P • XHZ-90S • XHZ-90Q • XHZ-200
ЛУЧИСТОЕ ТЕПЛО: Dixon YDW-II



DIXION


ИНКУБАТОРЫ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ

Инкубаторы DIXION Бэбигард обеспечивают комфортные условия окружающей среды, такие как температура, влажность воздуха, необходимая оксигенация и покой новорожденного. Графический дисплей отражает все тренды и позволяет врачу оценить состояние среды внутри инкубатора. Автоматическая воздушная завеса уменьшает потерю тепла, а двойные стенки инкубатора позволяют сохранять тепло в течение 2 часов.



КАМЕРА ИНКУБАТОРА С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ВОЗДУШНОЙ ЗАВЕСОЙ

сохраняет тепло даже при открытых боковых окнах

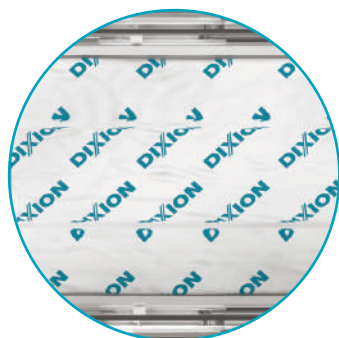

ВЫДВИГАЕМОЕ ПОВОРОТНОЕ ЛОЖЕ ВЕСЫ (опционально)

для проведения необходимых манипуляций без перекладывания младенца на ОРС



ДЕРЖАТЕЛЬ РЕНТГЕН-КАССЕТЫ



ЯЩИКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

с уникальной поворотной конструкцией



ИНКУБАТОРЫ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ



ОТКРЫТИЕ ОКОШЕК ОДНИМ ПРИКОСНОВЕНИЕМ

*позволяет сохранять стерильность
рук для последующего контакта*



ПОЛКА ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

*зафиксирована на стойке
инкубатора*



ЖК-ДИСПЛЕЙ С ПОДСВЕТКОЙ



ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ИНКУБАТОРА



ИНКУБАТОРЫ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ

БЭБИГАРД-1101



- ❖ Сервоконтроль t° воздуха
- ❖ Сервоконтроль t° кожи
- ❖ Индикаторы

БЭБИГАРД-1103



- ❖ Сервоконтроль t° воздуха
- ❖ Сервоконтроль t° кожи
- ❖ Пассивный увлажнитель
- ❖ Индикаторы
- ❖ Аварийный аккумулятор
- ❖ Ящик для принадлежностей

ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНКУБАТОРА С ФОТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ:



- ❖ Лампа фототерапии на стойке Dixon XHZ-90S



- ❖ Лампа фототерапии на гибкой ножке Dixon XHZ-90Q

ИНКУБАТОРЫ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ

БЭБИГАРД-1107



- ❖ Сервоконтроль t° воздуха
- ❖ Сервоконтроль t° кожи
- ❖ Контроль O₂
- ❖ Сервоконтроль влажности
- ❖ Индикаторы
- ❖ Аварийный аккумулятор
- ❖ Ящик для принадлежностей

БЭБИГАРД-1120



- ❖ Сервоконтроль t° воздуха, t° кожи
- ❖ Сервоконтроль влажности
- ❖ Контроль O₂
- ❖ ЖК-дисплей с подсветкой, запись трендов
- ❖ Аварийный аккумулятор
- ❖ Регулировка высоты основания
- ❖ Держатель рентген-кассеты
- ❖ Поворотные ящики

	БЭБИГАРД-1101	БЭБИГАРД-1103	БЭБИГАРД-1107	БЭБИГАРД-1120
Сервоконтроль t° воздуха	•	•	•	•
Сервоконтроль t° кожи	•	•	•	•
Пассивный увлажнитель	•	•		
Сервоконтроль влажности			•	•
Мониторинг содержания O ₂			•	•
Сервоконтроль O ₂			○	○
ЖК-дисплей с подсветкой				•
Индикаторы	•	•	•	
Аварийный аккумулятор				•
Регулировка высоты основания				•
Держатель рентген-кассеты				•
Запись трендов				•
Ящик для принадлежностей	•	•	•	•
Встроенные весы		○	○	○
○ — опция				

ОТКРЫТЫЕ РЕАНИМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Открытые реанимационные системы DIXION Бэбигард со встроенным обогревателем «Лучистое тепло», фототерапевтическим блоком и сервоконтролем температуры тела оборудованы удобными откидывающимися стенками и установлены на регулируемое мобильное основание с 4-мя антистатическими колесами.



ОБОГРЕВАТЕЛЬ «ЛУЧИСТОЕ ТЕПЛО»



ЖК-ДИСПЛЕЙ С ПОДСВЕТКОЙ


Сервоконтроль, Ангар-таймер




ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ




ПЛАВНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ

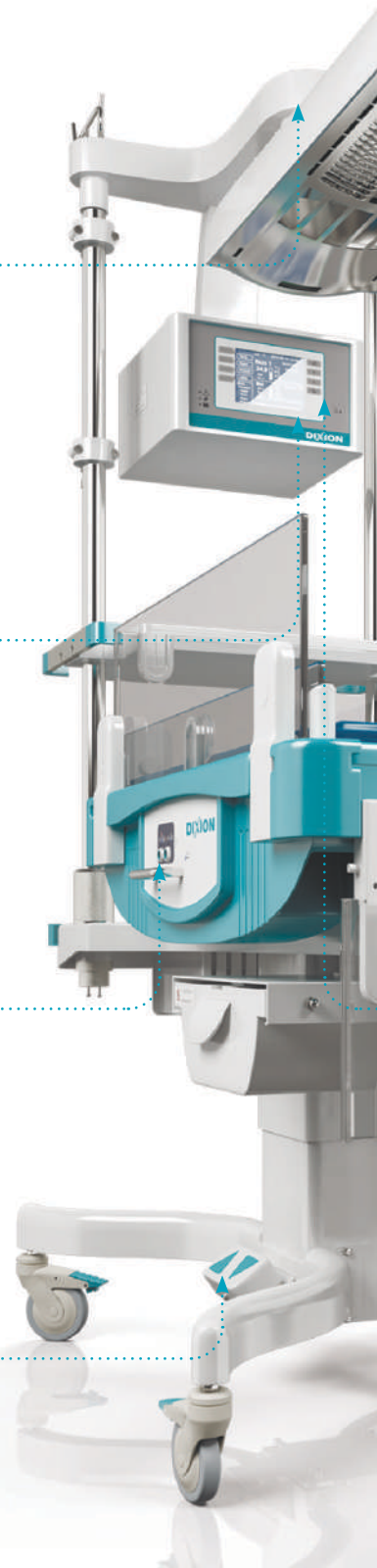


ОТКРЫТЫЕ РЕАНИМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

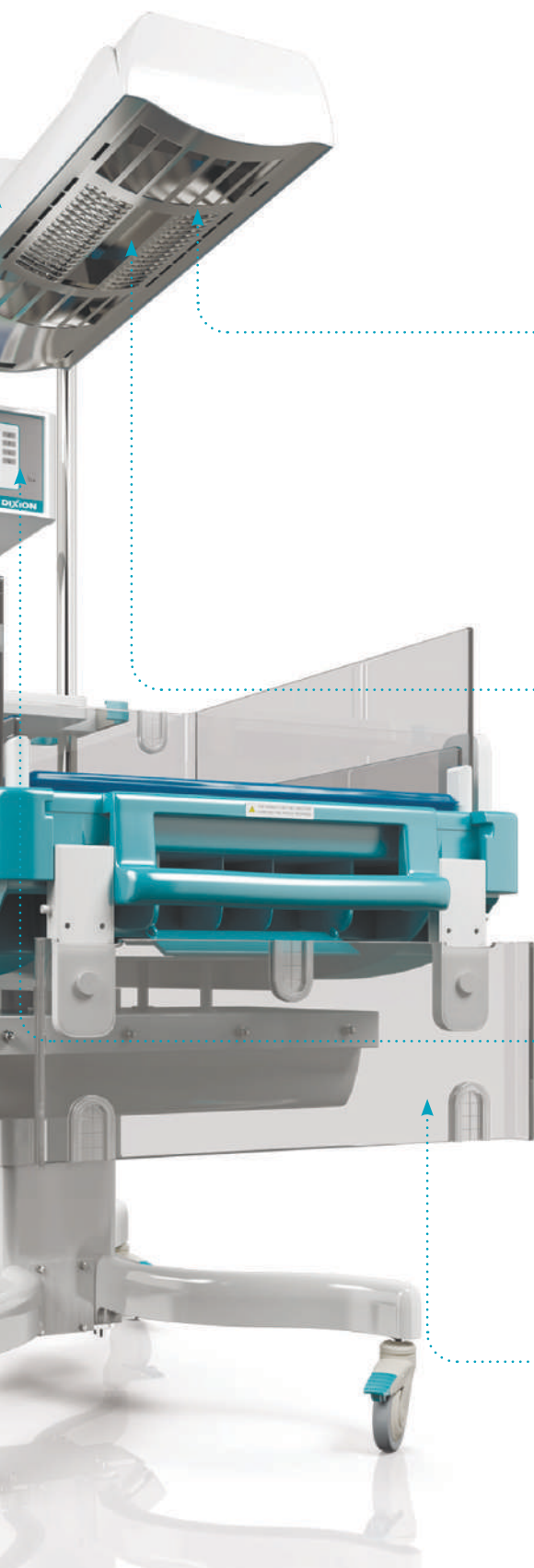

2 РЕЖИМА ПОДСВЕТКИ:
РАБОЧАЯ И НОЧНАЯ

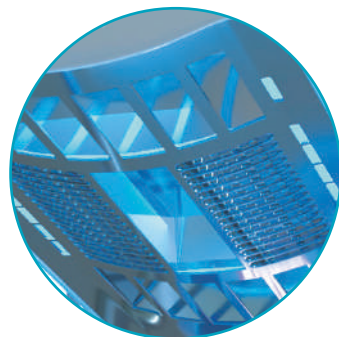


LED БЛОК ФОТОТЕРАПИИ

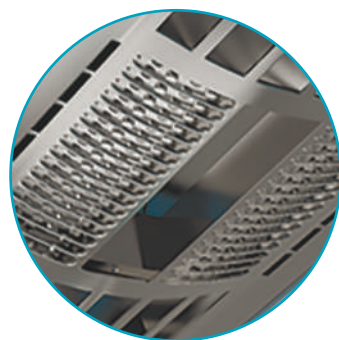

СИСТЕМА ТРЕВОЖНЫХ СИГНАЛОВ
со встроенным аккумулятором



ОТКИДЫВАЮЩИЕСЯ
БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ ЛОЖА
*бесшумная и плавная
регулировка наклона лежа*

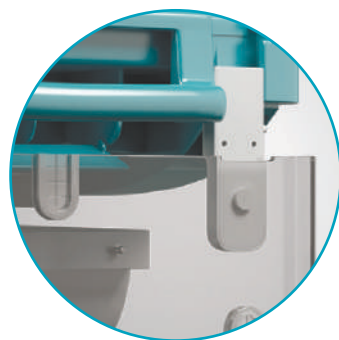

DIXION

ОТКРЫТЫЕ РЕАНИМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

БЭБИГАРД-1138




- ❖ Сервоконтроль t° воздуха
- ❖ Сервоконтроль t° кожи
- ❖ Обогреватель «Лучистое тепло»
- ❖ Регулировка наклона ложа

БЭБИГАРД-1139



- ❖ Сервоконтроль t° воздуха
- ❖ Сервоконтроль t° кожи
- ❖ Обогреватель «Лучистое тепло»
- ❖ Регулировка наклона ложа
- ❖ Откидывающиеся стенки
- ❖ Держатель рентген-кассеты

ВАРИАНТЫ МАТРАСИКОВ ДЛЯ ОРС:

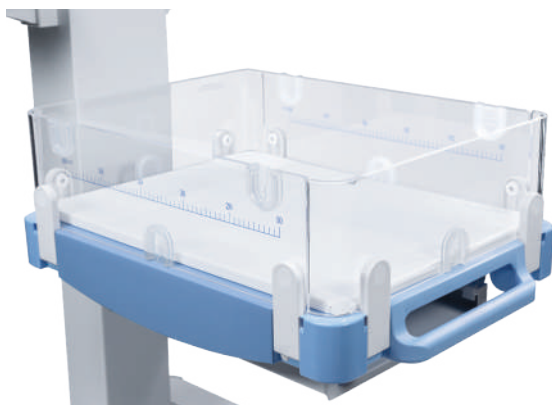

- ❖ Удобный и легкий полиуретановый матрасик (базовая комплектация)



- ❖ Тактильно приятный противопролежневый гелевый матрасик (опционально)

ОТКРЫТЫЕ РЕАНИМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

БЭБИГАРД-1140



- ❖ Сервоконтроль t° воздуха
- ❖ Сервоконтроль t° кожи
- ❖ Обогреватель «Лучистое тепло»
- ❖ Регулировка наклона лежа
- ❖ Откидывающиеся стенки
- ❖ Держатель рентген-кассеты
- ❖ Светодиодная фототерапия

БЭБИГАРД-1145



- ❖ Сервоконтроль t° воздуха, t° кожи
- ❖ Обогреватель «Лучистое тепло»
- ❖ Регулировка наклона лежа
- ❖ Откидывающиеся стенки
- ❖ Светодиодная фототерапия
- ❖ ЖК-дисплей с подсветкой
- ❖ Обогрев лежа
- ❖ Регулировка высоты стенда
- ❖ Встроенный аккумулятор

	БЭБИГАРД-1138	БЭБИГАРД-1139	БЭБИГАРД-1140	БЭБИГАРД-1145
Сервоконтроль t° воздуха	•	•	•	•
Сервоконтроль t° кожи	•	•	•	•
Обогреватель «Лучистое тепло»	•	•	•	•
Регулировка наклона лежа	•	•	•	•
Откидывающиеся стенки		•	•	•
Держатель рентген-кассеты		•	•	
Светодиодная фототерапия			•	•
ЖК-дисплей с подсветкой				•
Тренды 48 часов				•
Нижний обогрев лежа				•
Гелевый матрасик				•
Регулировка высоты стенда				•
Встроенный аккумулятор				•
2 режима подсветки: рабочая и ночная				•
Ящик для принадлежностей				•

ФОТОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ


Фототерапевтическое оборудование Dixon предназначено для проведения сеансов лечения гипербилирубинемии у новорожденных и детей в родильных домах, процедурных кабинетах, детских поликлиниках.

Круговая фототерапия Dixon XHZ-200 – новое слово в лечении желтухи новорожденных. Комфортный в использовании, безопасный аппарат незаменим для младенцев высокого риска, особенно с ядерной желтухой. Помогает существенно сократить сроки лечения благодаря максимально интенсивному световому потоку, всецело направленному на поверхность кожи ребенка.



ЦВЕТНОЙ ЖК-ДИСПЛЕЙ ДИАГОНАЛЬЮ 5,1"

и аварийные индикаторы

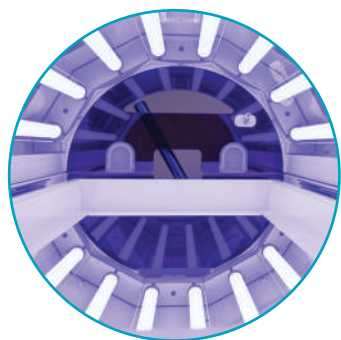

16 СИНИХ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП


с независимым контролем верхних и нижних источников света




ЯЩИК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ



РЕГУЛИРУЕМОЕ ПО ВЫСОТЕ
ОСНОВАНИЕ

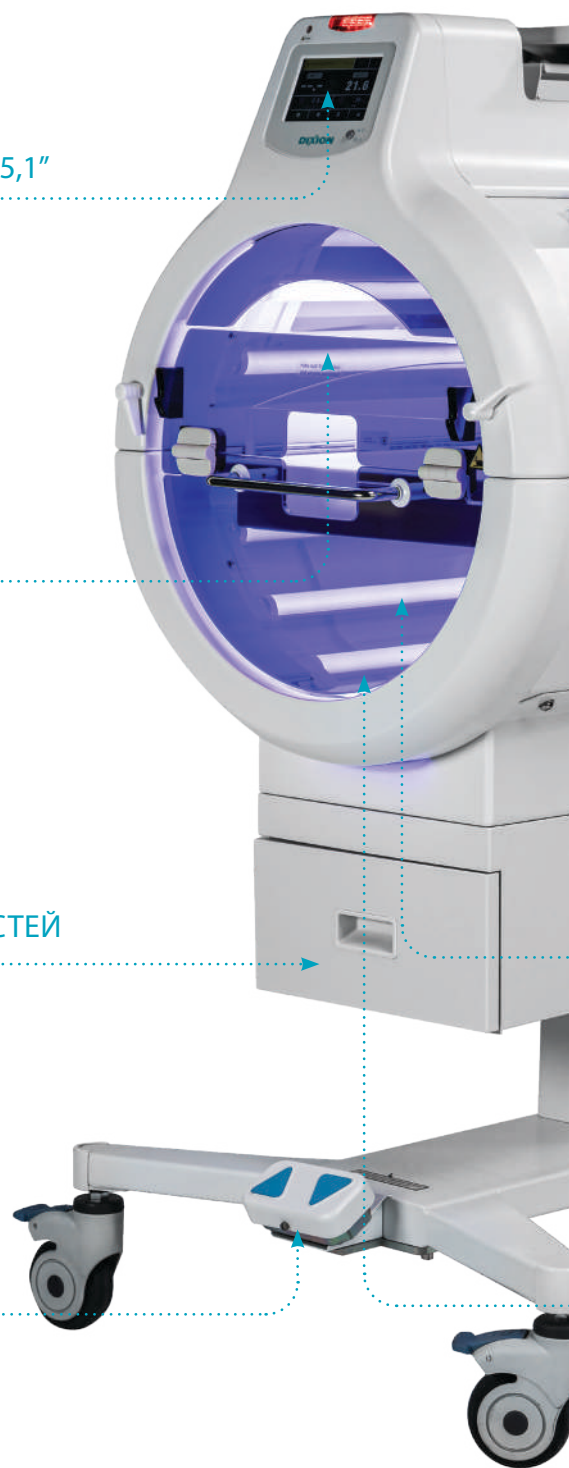

ФОТОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

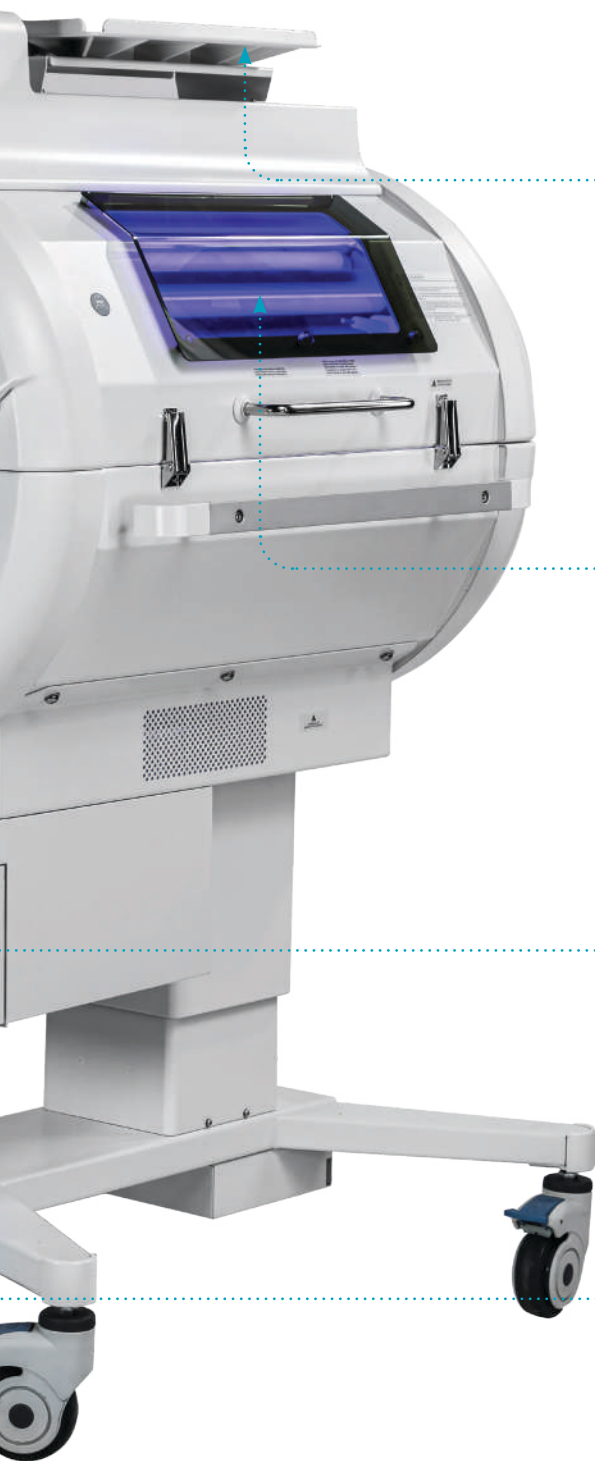

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОЛКА

для размещения монитора пациента



ОКОШКО ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ

позволяет контролировать состояние младенца, не нарушая его покой



ВЫДВИЖНАЯ КРОВАТКА

для быстрого доступа к новорожденному



РЕГУЛИРОВКА УГЛА НАКЛОНА ЛОЖА



ФОТОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

DIXION XHZ-90L



- ❖ Предназначен для лечения гипербилирубинемии новорожденных
- ❖ Совместимость с любым инкубатором
- ❖ Синий свет лампы
- ❖ Регулируемые угол наклона и высота
- ❖ Мобильный стенд с блокировкой колес
- ❖ Источник света — светодиоды

DIXION XHZ-90P



- ❖ Основной источник излучения— синие светодиоды
- ❖ Дополнительные желтые светодиоды для смягчения светового излучения
- ❖ Два уровня регулировки интенсивности излучения
- ❖ Активная система охлаждения, предотвращающая перегрев
- ❖ Регулировка стойки по высоте
- ❖ Регулируемый угол наклона и расположение облучателя относительно стойки по горизонтальной оси
- ❖ Таймер на панели управления
- ❖ Устойчивое 5-ти колесное основание с блокировкой

	DIXION XHZ-90L	DIXION XHZ-90P	DIXION XHZ-90S	DIXION XHZ-90Q	DIXION XHZ-200
Диапазон излучения синего света, не менее 430-470 нм	•	•	•	•	•
Диапазон излучения желтого света, не менее 585-595 нм		•			
Источник излучения 360° - интенсивная фототерапия					•
Ламповый модуль на стойке	•	•	•		
Гибкий световод				•	
Изменение угла лампового модуля	•	•	•	•	
Регулировка расстояния лампового модуля по горизонтали относительно стойки		•	•		
Регулируемая по высоте стойка (стенд)	•	•	•		○
Крепление на корпусе ОРС или инкубатора				•	
Блок управления с сенсорным дисплеем			•	•	•
Регулировка интенсивности излучения		•	•	•	•
○ — опция					

ФОТОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

DIXION XHZ-90S

NEW



- ❖ Цветной сенсорный ЖК-дисплей 4,3"
- ❖ Ступенчатая регулировка интенсивности синего света в диапазоне от 0% до 100%
- ❖ 2 режима отсчета времени – прямой и обратный отсчет
- ❖ Счетчик общей наработки источника излучения
- ❖ Эффективная область 40×30 см
- ❖ Мобильное 4-х колесное основание с тормозами
- ❖ Изменение угла лампового модуля для точной регулировки области излучения
- ❖ Регулируемая по высоте стойка
- ❖ Облегченная конструкция - масса 15,5 кг

DIXION XHZ-90Q

NEW



- ❖ Ламповый модуль на гибкой ножке с диапазоном регулировки угла наклона 0-90°
- ❖ Срок службы светодиодов не менее 10 000 часов
- ❖ Цветной сенсорный ЖК-дисплей с наглядным отображением параметров терапии
- ❖ Возможность крепления на любом неонатальном оборудовании
- ❖ Возможность проведения сеансов фототерапии с прерываниями
- ❖ Аварийные индикаторы
- ❖ Легкость, масса 3,5 кг



DIXION YDW-II



Лампа обогрева разработана специально для поддержания комфортной температуры новорожденных: как для поддержания температуры тела, так и для создания оптимальной температуры окружающей среды. Источником излучения являются керамические пластины, срок эксплуатации которых более 2000 часов.

- ❖ 10 тепловых режимов
- ❖ Рабочий диапазон температуры от 20° до 38°
- ❖ Изменение высоты стойки
- ❖ Изменение угла осветительного блока
- ❖ Устойчивое П-образное основание
- ❖ Колеса с блокировкой

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

❖ Кислородные палатки

Кислородные палатки предназначены для проведения кислородной терапии новорожденных. Данное оборудование повышает эффективность лечения.

Кислородные палатки обеспечивают необходимый уровень концентрации дыхательной смеси за счёт закрытой конструкции и отсутствия утечки кислорода в окружающий воздух. Прозрачный материал палаток обеспечивает постоянное наблюдение за малышом.

Размеры:

YZ-130 – Ø 16 см, высота 13 см

YZ-160 – Ø 20 см, высота 16 см

YZ-200 – Ø 25 см, высота 20 см

YZ-260 с открывающимися окнами (Д28 × Ш27 × В18 см)

YZ-300 с открывающимися окнами (Д33 × Ш28 × В17 см)



❖ Устройство для фиксации головы новорожденных

Устройство предназначено для фиксации головы новорожденного во время лечебных процедур, таких как СИПАП-терапия или интубация трахеи, венепункция мягких тканей черепа, а также во время рентгенографии головы.



❖ Мешок Амбу для новорожденных

Устройство предназначено для ручной искусственной вентиляции легких у новорожденных и детей. Используется в условиях дыхательной недостаточности и при проведении реанимационных мероприятий.





DIXION

Телефоны: +7 (495) 780-07-93, 8 (800) 100-44-95 (звонок бесплатный)

e-mail: neonatal@stormoff.ru, www.dixon.ru